



KEELERS FICKHANDTAG




LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA

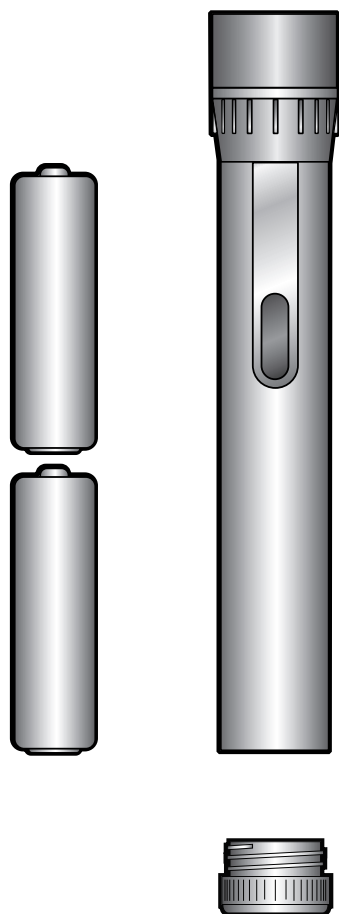

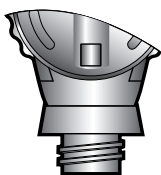

Anslutning av instrumenthuvuden till handtaget.

Instrumenthuvudet ansluts till handtaget med en skruvgänga. Anslut instrumenthuvudet på det sätt som visas och vrid det medurs. Kontrollera anslutningen mellan huvudet och handtaget.

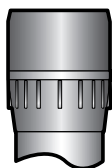

Kompatibilitet

Keelers Specialist-, Professional-, Standard- och Practitioner-oftalmoskop och Keelers retinoskop är kompatibla med handtag av typ Keeler Vista 2.8v och 3.6v.



Kontroll för på/avslag och ljusstyrka

Slå på instrumentet genom att vrida ljusstyrkekontrollen åt höger som visas. Slå av instrumentet genom att vrida ljusstyrkekontrollen åt vänster som visas.

Sätta in/byta batterier

Skruva av batterilocket, sätt in batterierna och sätt sedan tillbaks batterilocket på det sätt som visas.

Använd följande typer av torrbatterier:

Keelers fickhandtag - 2 stycken 1,5-volts torrbatterier av typ AA - Duracell MN 1500 eller motsvarande.

Rengöringsinstruktioner

Rengör endast instrumentet manuellt, på det sätt som framgår nedan, och sänk aldrig ner det i vätska av något slag:

1. Torka av den utvändiga ytan med en ren absorberande, luddfri trasa som fuktats med en blandning av vatten och rengöringsmedel (2 volymprocent), eller med en vatten/isopropylalkohollösning (70 volymprocent).
2. Se till att överskottslösning inte kommer in i instrumentet. Trasan ska inte vara helt indränkt med lösningen.
3. Torka ytorna omsorgsfullt för hand med en ren, luddfri trasa.
4. Kassera det material som användes vid rengöringen på ett säkert sätt.

Garanti och service

Det finns inga delar som användaren själv kan utföra service på. Allt förebyggande underhåll och all service måste utföras av Keelers behöriga representanter.

Din Keelers handtag har en 3-årsgaranti, och vi byter ut den eller reparerar den kostnadsfritt på följande villkor:

1. Det fel som föreligger beror på fel vid tillverkningen
2. Inköpet ska kunna styrkas vid varje garantianspråk

TILLVERKAD I STORBRITANNIEN AV:

Keeler Limited

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

England

Tel.: +44 1753 857177

Fax: +44 1753 827145

KOSTNADSFRITT: 0800 521 251

DISTRIBUTÖR:

Keeler Instruments Inc

456 Parkway

Broomall

PA 19008, USA

Kostnadsfritt: 1 800 523 5620

Tel.: 610 353 4350

Fax: 610 353 7814

"CE-märkningen på denna ☐
produkt visar att den har testats ☐
och befunnits uppfylla de krav ☐
som ställs i direktivet 93/42/EEG ☐
om medicinska anordningar."



— A —
HALMA GROUP
C O M P A N Y



Distributör